



CATÁLOGO

Desde hace más de 50 años junto a los profesionales de la sonrisa.

Trabajamos cada día con pasión y competencia para poner a disposición de dentistas y protésicos dentales lo mejor para la prótesis removible. Lo que para nosotros tiene valor es lo más natural del mundo: la sonrisa de vuestros clientes...
We take care of your smile!

- 7 Dientes artificiales
- 13 Dientes artificiales - Productos complementarios
- 16 Materiales para diagnosis radiológica
- 18 Resinas
 - 19 Resinas C&B
 - 20 Resinas para cubetas y Alginato
 - 21 Resinas termopolimerizables para prótesis removibles
 - 22 Resinas autopolimerizables
- 23 Resinas para la impresión 3D
- 26 Materiales CAD/CAM
- 29 Yesos
- 31 Productos para duplicación
- 34 Revestimientos y Preformas
 - 32 Revestimientos
 - 33 Preformas
- 38 Abrasivos y productos para acabado
- 41 Ceras
- 43 Digital



DIENTES ARTIFICIALES

ACRYSMART

DISPOSITIVO
SANITARIO

Acry Smart es el innovador sistema de dientes postizos de resina aún más versátil, resistente y estéticamente natural, para resultados protésicos siempre excelentes.

Surtido de 16 colores, 15 formas de dientes superiores, 7 de dientes inferiores y 16 de muelas.



Ventajas:

Funcional:

Los dientes anteriores AcrySmart permiten una total individualización de las dinámicas funcionales manteniendo una estética superior.

Fácil:

AcrySmart facilita el montaje tanto para el concepto diente a diente como para la metodología diente cada dos dientes.


Smart:

Los molares tienen una morfología periférica estudiada para permitir una individualización del eje coronal capaz de permitir el montaje en el centro de la cresta incluso en situaciones desfavorables.



Duradero:

La particular configuración de los surcos de desarrollo de los dientes traseros, posee una eficiencia de trituración superior y ese requisito se mantiene con el paso del tiempo incluso frente a desgastes de las vertientes cuspidas.

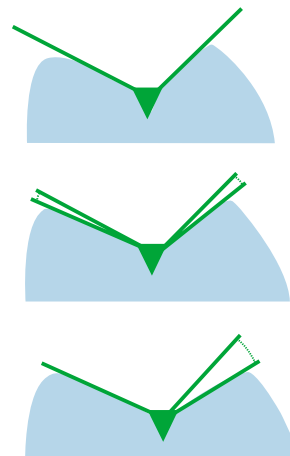

Versátil:

Su particular estructura molecular, le permite al protésico dental transformar los dientes de resina utilizados para el montaje directamente en disilicato o en vitrocerámica.



Producto

Código

Acry Smart 6 Upper	0120090
Acry Smart 6 Lower	0120091
Acry Smart 8 Upper	0120092
Acry Smart 8 Lower	0120093
Acry Smart Set 28 Dientes	0120094

ACRY PLUS^{evo}

Dientes en PMMA realizados para obtener los mejores resultados en:

- Prótesis total
- Overdenture
- Toronto bridge
- All on four
- Prótesis con barra

Surtido de 16 colores, 8 formas de dientes superiores, 5 de dientes inferiores y 12 de muelas.

Acry Plus Evo puede combinarse con la gama EVO 2ST, el diente de 2 capas con la misma variedad de formas.



Ventajas:


Estética

Textura y caracterización otorgan naturalidad al manufacturado. Las formas anchas de los cuellos permiten una adaptación estética mejor en prótesis con estructuras subyacentes.



Función

La oclusión diente a diente reduce los puntos de contacto limitando los traumas en las estructuras subyacentes a la prótesis.

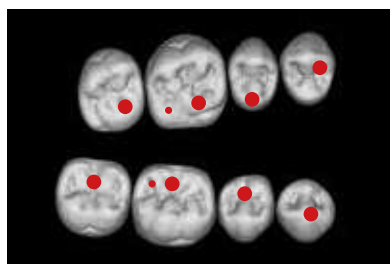

Simplicidad de utilización

La forma particular en la zona del cuello de los posteriores, simplifica y acelera la realización del montaje, evitando el afloje del talón del diente.



Producto	Código
Acry Plus Evo 6 Upper	0120036
Acry Plus Evo 6 Lower	0120037
Acry Plus Evo 8 Upper	0120038
Acry Plus Evo 8 Lower	0120039
Acry Plus Evo Set 28 Dientes	0120042

Evo 2ST

EVO 2ST es el diente de 2 capas que se caracteriza por la elevada estética y es ideal para la prótesis en implantes.

EVO 2ST tiene las mismas formas que Acry Plus EVO, simplificando el paso del provisional a la prótesis definitiva.

Surtido de 16 colores, 8 formas de dientes superiores, 5 de dientes inferiores y 12 de muelas.

Producto	Código
EVO 2ST 6 Upper	0120080
EVO 2ST 6 Lower	0120081
EVO 2ST 8 Upper	0120082
EVO 2ST 8 Lower	0120083
EVO 2ST Set 28 Dientes	0120084



ACRY PLUS

DISPOSITIVO
SANITARIO

Dientes artificiales en polimetil metacrilato realizados con multicapas cromáticas.


ACRY PLUS: Surtido de 19 colores, 22 formas de dientes superiores, 12 formas de dientes inferiores, 10 formas de muelas.

ACRY PLUS V: Surtido de 16 colores, 28 formas de dientes superiores, 12 formas de dientes inferiores, 10 formas de muelas.




Ventajas:

- Excelente dureza y resistencia a la abrasión
- Estabilidad del color
- Óptima resistencia a la adhesión de la placa
- Amplio surtido de formas y colores

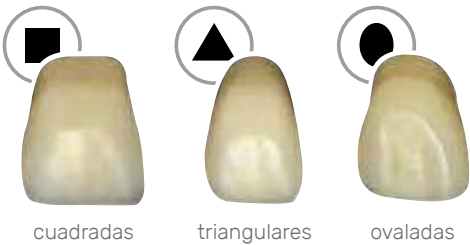

cuadradas triangulares ovaladas

Selección de los incisivos subdividida en formas cuadradas, triangulares y ovaladas.

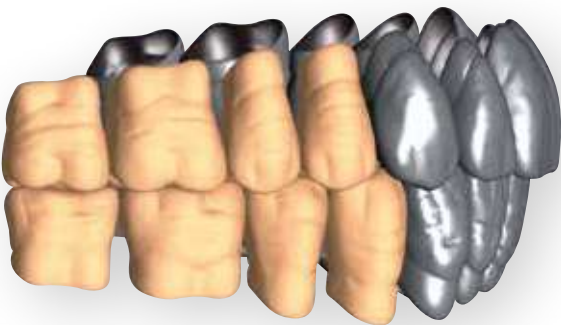

Posteriores geométricos con ángulo cuspal de 20°, ideal para el montaje en balanceo bilateral con oclusión "diente a dos dientes".

Producto	Código
Acry Plus 6 Upper	0120010
Acry Plus 6 Lower	0120011
Acry Plus 8 Upper	0120012
Acry Plus 8 Lower	0120013
Acry Plus Set 28 Dientes	0120014

Producto	Código
Acry Plus V. 6 Upper	0120020
Acry Plus V. 6 Lower	0120021
Acry Plus V. 8 Upper	0120022
Acry Plus V. 8 Lower	0120023
Acry Plus V. Set 28 Dientes	0120024

ACRYCETTE

DISPOSITIVO
SANITARIO

Acry Cette es el sistema de carrilas de resina acrílica que con su estética, practicidad y versatilidad es ideal para la realización de trabajos provisionales de prótesis removible y prótesis fija.

Prótesis removible:

- Prótesis en aparatos y barra
- Prótesis híbridas
- Toronto Bridge
- Trabajos telescópicos
- Puentes y barras con fresados CAD/CAM
- Prótesis esquelética

Prótesis fija:

- Realización de provisionales estéticos
- Transformación de disilicato de litio
- Provisionales para cargas inmediatas
- Restauraciones de sobredentadura

Anteriores: 6 formas incisivas superiores y 4 formas incisivas inferiores. Disponibles de coloración A2 - A3 - A3,5

Posteriores: 3 formas diatóricas superiores y 3 formas diatóricas inferiores.

Ventajas:

- Simplicidad de uso
- Velocidad de ejecución de los trabajos
- Estética natural
- Elevada resistencia a la abrasión
- Transformables en disilicato de litio
- Perfectos para la escanerización de la forma, textura y anatomía oclusal



Ángulo de las cúspides 35°



Producto

Acry Cette 6 Upper
Acry Cette 6 Lower
Acry Cette 8 Upper
Acry Cette 8 Lower

Código

0130001
0130002
0130003
0130004

Producto

Acry Cette Kit Set

Código

1180001



ACRYLUX

DISPOSITIVO
SANITARIO

Dientes artificiales en polimetil metacrilato de tres capas cromáticas.

Las características principales son:

- Efecto estético natural debido a la sobreposición de las tres capas cromáticas y al corte en forma de corona de los bordes incisales
- Resistencia químico-física debido a la utilización de materiales de primera calidad
- El amplio surtido de formas y colores que se adaptan perfectamente a cualquier tipo de exigencia protésica

Surtido de: 19 colores Acry Lux, 18 colores Acry Lux V, 25 formas de dientes superiores, 12 de dientes inferiores y 16 de muelas.

Producto	Código
Acry Lux 6 Upper	0090001
Acry Lux 6 Lower	0090002
Acry Lux 8 Upper	0090003
Acry Lux 8 Lower	0090004
Acry Lux V. 6 Upper	0090009
Acry Lux V. 6 Lower	0090010
Acry Lux V. 8 Upper	0090011
Acry Lux V. 8 Lower	0090012
Acry Lux V. Set 28 Dientes	0090013
Acry Lux Set 28 Dientes	0100001



ACRYROCK V

DISPOSITIVO
SANITARIO

Dientes artificiales en polimetil metacrilato de dos capas cromáticas.

Las características principales son:

- El buen efecto estético debido a la sobreposición de las dos capas cromáticas y al corte en forma de corona de los bordes incisales
- La buena resistencia químico-física debido a la utilización de materiales de primera calidad
- El amplio surtido de formas y colores que se adaptan perfectamente a cualquier tipo de exigencia protésica

Surtido de: 19 colores, 32 formas de dientes superiores, 19 formas de dientes inferiores y 22 muelas.

Producto	Código
Acry Rock V. 6 Upper	0010013
Acry Rock V. 6 Lower	0010014
Acry Rock V. 8 Upper	0010015
Acry Rock V. 8 Lower	0010016
Acry Rock V. Set 28 Dientes	0020003





DIENTES ARTIFICIALES PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Live mould chart

Surtido completo de las formas.

Incluye también la guía de colores de la línea de referencia.

Producto	Código
Live Mould Chart Acry Rock V.	0020004
Live Mould Chart EVO 2ST	0060002
Live Mould Chart Acry Lux	0110002
Live Mould Chart Acry Lux V.	0110004
Live Mould Chart Acry Plus	0120015
Live Mould Chart Acry Plus V.	0120025
Live Mould Chart Acry Plus EVO	0120046
Live Mould chart Acry Smart	0120098



Intro Kit

Kit compuesto por 8 set de 28 dientes (32 tablillas) y guía de colores Steel.

Producto	Código
Intro Kit Acry Plus	0120055
Intro Kit Acry Plus V	0120056
Intro Kit Acry Plus Evo	0120057
Intro Kit Acry Smart	0120058
Intro Kit Acry Lux	0120066
Intro Kit Acry Lux V	0120067



Guía de colores

Versión de base:

- Acry Rock V - 19 colores
- Acry Lux - 19 colores
- Acry Lux V - 18 colores
- Acry Plus - 19 colores
- Acry Plus V - 16 colores
- Acry Plus EVO - 16 colores
- Acry Smart - 16 colores

Producto	Código
Guía de colores Acry Rock V.	0030002
Guía de colores Acry Lux	0110001
Guía de colores Acry Lux V.	0110003
Guía de colores Acry Plus	0120016
Guía de colores Acry Plus V.	0120026
Guía de colores Acry Plus Evo	0120045
Guía de colores Acry Smart	0120097




Guía de colores - Steel

Guía de colores de diseño cautivador con inserciones en acero

Disponible en las versiones:

- Acry Plus - 19 colores
- Acry Plus V - 16 colores
- Acry Plus EVO - 16 colores
- Acry Smart - 16 colores

Producto	Código
Guía de colores Acry Plus Steel	0120060
Guía de colores Acry Plus V. Steel	0120061
Guía de colores Acry Plus Evo Steel	0120062
Guía de colores Acry Smart Steel	0120095

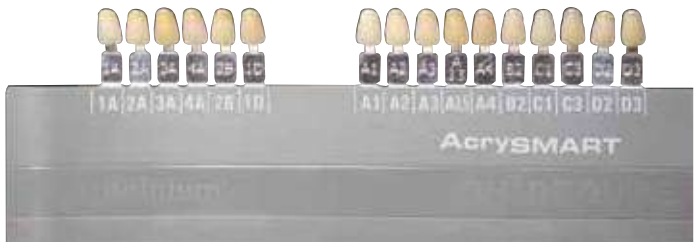



MATERIALES PARA DIAGNOSIS RADIOLÓGICA

Acry Plus EVO RX

DISPOSITIVO
SANITARIO

Dientes estéticos radiopacos.

Acry Plus EVO RX es la línea de dientes estéticos radiopacos que permite realizar prótesis provisionales utilizables también para adquirir las imágenes TAC. Acry Plus EVO RX está disponible en las mismas formas que el Acry Plus Evo para que las prótesis provisionales realizadas sean iguales a las prótesis definitivas.

Producto	Código
Acry Plus Evo Rx 6 Upper	0120047
Acry Plus Evo Rx 6 Lower	0120048
Acry Plus Evo Rx 8 Upper	0120049
Acry Plus Evo Rx 8 Lower	0120050
Acry Plus Evo Rx Set 28 Dientes	0120051



Acry C&B RX

DISPOSITIVO
SANITARIO

Resina radiopaca para la diagnosis radiológica.

- construcción del provisional
- alargamiento del talón en los dientes radiopacos

Producto		Código
Acry C&B RX	100 g	0700050
Acry C&B Líquido Self Curing	60 ml	0690005



Acry Self RX

DISPOSITIVO
SANITARIO

Resina radiopaca para paladares.

Se emplea en la realización de la prótesis provisional en la parte extendida o totalmente edéntula.
Ideal para la lectura radiológica del espesor de la mucosa oral.

Producto		Código
Acry Self Rx Polvo	100 g	1160002
Acry Self Rx Polvo	500 g	1160001
Acry Self Líquido	50 ml	1030001
Acry Self Líquido	250 ml	1060003





RESINAS

Acry C&B

Resina acrílica de alto peso molecular para:

- provisionales indirectos en laboratorio
- provisionales de larga duración
- revestimiento estético sobre puentes y coronas metálicos
- reparaciones

Ventajas:

- simplicidad de empleo
- versatilidad
- elevado resultado estético también cuando hay presencia de espesor reducido
- resistencia a la abrasión y a la ruptura
- baja adhesión de la placa bacteriana
- biocompatibilidad

DISPOSITIVO
SANITARIO



Coloraciones disponibles para dentina, cervical and incisal:

A1 - A2 - A3 - A3,5 - B2 - C1 - C2 - D2 - D3 - Incisal 1 1A - 1C - 1D - 1E - 2A - 2B - 4A - 4B - Incisal 2

Producto	Código	Producto	Código
Acry C&B Dentina 40 g	0640001	Acry C&B Cervical 500 g	0650003
Acry C&B Dentina 100 g	0640002	Acry C&B Incisal 40 g	0660001
Acry C&B Dentina 500 g	0640003	Acry C&B Incisal 100 g	0660002
Acry C&B Cervical 40 g	0650001	Acry C&B Incisal 500 g	0660003
Acry C&B Cervical 100 g	0650002		

Acry C&B Liquid

Regular. indicado para la técnica tradicional en mufla

Special. indicado para la técnica con estratificación con espátula

Self Curing. para reparaciones y para realizar puentes y coronas provisionales

DISPOSITIVO
SANITARIO



Producto	Código	Producto	Código
Acry C&B Líquido Regular 60 ml	0670005	Acry C&B Líquido Special 500 ml	0680007
Acry C&B Líquido Regular 250 ml	0670006	Acry C&B Líquido Self C. 60 ml	0690005
Acry C&B Líquido Regular 500 ml	0670007	Acry C&B Líquido Self C. 250 ml	0690006
Acry C&B Líquido Special 60 ml	0680005	Acry C&B Líquido Self C. 500 ml	0690007
Acry C&B Líquido Special 250 ml	0680006		

Acry C&B Kit

Kit para puentes y coronas provisionales compuesto por:

3 x 40g Dentina • 1 x 40g Esmalte universal • 2 x 60ml Líquido Self Curing

Accesorios: 1 Vasito en goma; 1 Espátula

Colores disponibles: A2 - A3,5 - C2 or 2A - 2B - 4B

Producto	Código
Acry C&B Kit	0590005



Opaker

Opaker líquido para puentes y coronas con un gran efecto de recubrimiento y óptima adherencia de metal-resina.

Colores disponibles:

A1- A2 - A3 - A3,5 - B2 - C1 - C2 - D2 - D3
1A - 1C - 1D - 1E - 2A - 2B - 4A - 4B - Pink

Producto	Código
Acry C&B Opaker 10 ml	0590004
Diluyente 10 ml	0600001
Diluyente 60 ml	0610001

DISPOSITIVO
SANITARIO



Resinas para cubetas y Alginato

Acry Tray

DISPOSITIVO
SANITARIO

Resina acrílica autopolimerizable de elevada elasticidad para cubetas individuales, cubetas funcionales y planchas para montaje de dientes.

Coefficiente de retracción mínimo y ningún tiempo de espera, masa trabajable inmediatamente después de la mezcla.
Envase con medidor dosificador.

Color: rosa

Producto	Código	
Acry Tray Polvo	500 g	0720002
Acry Tray Polvo	1.000 g	0750002
Acry Tray Polvo	5.000 g	0780002
Acry Tray Líquido	250 ml	0730002
Acry Tray Líquido	500 ml	0760002
Acry Tray Líquido	2.500 ml	0780003



Plaque Photo

DISPOSITIVO
SANITARIO

Planchas de resina fotopolimerizable, de uso fácil, estabilidad dimensional y resistencia a la torsión.

Las planchas Plaque Photo están indicadas para:

- cubetas individuales
- cubetas funcionales en pacientes sin dientes
- planchas para montaje de dientes en las prótesis móviles
- placas oclusales

Color: rosa - neutro - azul

Producto	Código	
Plaque Photo	50 u.	0800013



Alginato

DISPOSITIVO
SANITARIO

Alginato para impresiones de precisión.

Disponible en dos versiones: Cromático y Dust Free.
Composición de 24 sobres de 450 g cada.

Cromático: alginato de variación cromática

sabor: menta

variaciones cromáticas: violeta - mezclado
ciclamen - elaboración
verde - inserción en boca

Dust Free: alginato de mezclado y tiempo de retenido rápidos

sabor: menta

Color: verde

Producto	Código	
Alginato Cromático	450 g	2040003
Alginato Dust Free	450 g	2060003



Resinas termopolimerizables

Acry Pol R

DISPOSITIVO
SANITARIO

Resina termopolimerizable (PMMA) para la prótesis total y parcial, prótesis combinada y rebases.

Características: • resistencia mecánica • estabilidad de los colores y dimensiones • estética natural

Composición con cuchara dosificadora.

Colores: V3 - V4 - V7 - Pink - Neutro

Producto			Código		
Acry Pol R Polvo	500 g	0820002	Acry Pol R Líquido	250 ml	0830002
Acry Pol R Polvo	1.000 g	0850002	Acry Pol R Líquido	500 ml	0860002
Acry Pol R Polvo	5.000 g	0880002	Acry Pol R Líquido	2.500 ml	0880003



Acry Pol Fast

DISPOSITIVO
SANITARIO

Resina termopolimerizable (PMMA) para la prótesis total y parcial, prótesis combinada y rebases.

Características: • estabilidad dimensional • colores naturales
• la mufa puede introducirse directamente en agua hirviendo y mantenerla durante 20 minutos • versatilidad de empleo.

Composición con cuchara dosificadora.

Colores: V3 - V7 - V10

Producto		Código	Producto		Código
Acry Pol Fast Polvo	500 g	1000200	Acry Pol Fast Líquido	250 ml	1000203
Acry Pol Fast Polvo	1.000 g	1000201	Acry Pol Fast Líquido	500 ml	1000204
Acry Pol Fast Polvo	5.000 g	1000202	Acry Pol Fast Líquido	2.500 ml	1000205



Acry Pol LL

DISPOSITIVO
SANITARIO

Resina acrílica termopolimerizable (PMMA) de alto peso molecular. Indicada para realizar prótesis móvil total, parcial, combinada y rebases.

Principales ventajas: • elevada resistencia mecánica • óptimo efecto estético
• estabilidad cromática y dimensional • El largo periodo de plasticidad (1 hora) permite la preparación secuencial de diferentes prótesis

Composición con cuchara dosificadora.

Colores: V3 - V4 - V7 - V10 - OP1 - Pink - Neutro

Producto			Código		
Acry Pol LL Polvo	500 g	0920002	Acry Pol LL Líquido	250 ml	0930002
Acry Pol LL Polvo	1.000 g	0950002	Acry Pol LL Líquido	500 ml	0960002
Acry Pol LL Polvo	5.000 g	0980002	Acry Pol LL Líquido	2.500 ml	0980003



Acry Pol HI

DISPOSITIVO
SANITARIO

Resina acrílica termopolimerizable (PMMA) de alto peso molecular. Indicada para realizar prótesis móvil total, parcial, combinada y rebases.

Principales ventajas: • gran resistencia mecánica y a las cargas de rotura incluso con espesores reducidos • ideal para obtener prótesis ligeras con estabilidad cromática y dimensional • excelente efecto estético

Composición con cuchara dosificadora.

Colores: H3 - H4 - OP1

Producto			Código		
Acry Pol HI Polvo	500 g	1000300	Acry Pol HI Líquido	250 ml	1000301
Acry Pol HI Polvo	1.000 g	1000302	Acry Pol HI Líquido	500 ml	1000303
Acry Pol HI Polvo	5.000 g	1000304	Acry Pol HI Líquido	2.500 ml	1000305



Acry Self

DISPOSITIVO
SANITARIO

Resina acrílica (PMMA) polimerizable en frío para prótesis móvil, reparaciones y revestimientos. Especialmente indicada para la técnica de inyección.

Ventajas:

- se trabaja fácilmente
- óptima plasticidad
- estabilidad de color
- perfecta adhesión

Composición con cuchara dosificadora.

Colores: V3 - V4 - V7 - V10 - H3 - H4 - OP1 - Pink - Neutro

Producto	Código	Producto	Código
Acry Self Polvo	100 g 1020001	Acry Self Líquido	50 ml 1030001
Acry Self Polvo	500 g 1050002	Acry Self Líquido	250 ml 1060003
Acry Self Polvo	1.000 g 1080003	Acry Self Líquido	500 ml 1090003
Acry Self Polvo	5.000 g 1110002	Acry Self Líquido	2.500 ml 1110003



Acry Self P

DISPOSITIVO
SANITARIO

Resina acrílica autopolimerizable para la construcción de sillas en las prótesis esqueléticas con la técnica de vertido.

Puede también utilizarse para reparar prótesis móviles y rebases.

Ventajas:

- elevada fluidez y facilidad para trabajarla
- estabilidad de color

Composición con cuchara dosificadora.

Colores: V3 - V4 - V7 - V10 - OP1

Producto	Código	Producto	Código
Acry Self P Polvo	500 g 1150002	Acry Self P Líquido	250 ml 1150003
Acry Self P Polvo	1.000 g 1150005	Acry Self P Líquido	500 ml 1150006
Acry Self P Polvo	5.000 g 1150008	Acry Self P Líquido	2.500 ml 1150009



Acry Ort SC

DISPOSITIVO
SANITARIO

Resina acrílica autopolimerizable para la realización de placas ortodónticas y construcción de mordidas.

Fácil de trabajar y caracterizada por una gran transparencia. Adecuada para utilizar también con la técnica de vertido.

Composición con cuchara dosificadora.

Colores: transparente

Producto	Código	Producto	Código
Acry Ort SC Polvo	500 g 1220002	Acry Ort SC Líquido	250 ml 1230002
Acry Ort SC Polvo	1.000 g 1250002	Acry Ort SC Líquido	500 ml 1260002
Acry Ort SC Polvo	5.000 g 1280002	Acry Ort SC Líquido	2.500 ml 1290002





RESINE PER STAMPA 3D

RU-001 Temporary

Cod. producto: 0220001

Resina para impresión 3D biocompatible para la fabricación aditiva de puentes y coronas provisionales. Los provisionales creados con resina **ACRY Print 3D RU-001 Temporary** pueden fijarse con cementos protésicos comunes. **ACRY Print 3D RU-001 Temporary** está compuesta por resina metacrilada y rellenos inorgánicos funcionales con partículas de 0,4 a 3 micrómetros.

Embase: 1000g

Color: A2 - A3

Ventajas

- Materiales biocompatibles
- Excelentes propiedades mecánicas
- Baja viscosidad
- Fácil de limpiar
- Radiopaca

MD
CLASSE IIA



RU-002 Model

Cod. producto: 0220002

Resina fotopolimerizable destinada a ser utilizada en combinación con equipos de fotopolimerización extraoral. Adecuado para la producción de modelos dentales protésicos y ortodónticos. **ACRY Print 3D RU-002 Model** se compone de resinas funcionales de metacrilato, iniciadores, colorantes y estabilizadores.

SOLO PARA USO EXTRAORAL.

Embase: 1000g

Color: Gris

Ventajas

- Alta estabilidad dimensional
- Apariencia optimizada
- Implementable en el flujo digital

RU-003 Try-In

Cod. producto: 0220003

Resina polimerizable curable a la luz prevista para el uso junto con un equipo de curado por la luz extraoral. Adecuado para la producción de pruebas funcionales, prótesis totales y maquetas estéticas. **ACRY Smile 3D RU-003 Try-In** se compone de resinas funcionales de metacrilato, iniciadores, colorantes y estabilizadores.

Embase: 1000g

Color: A2

Ventajas

- Mayor biocompatibilidad Seguridad Clínica
- Mayor Resistencia al Impacto
- Valores químico-físicos significativamente mejorados
- Alto impacto

MD
CLASSE I



RU-004 Denture HI

Cod. producto: 0220004

Resina fotopolimerizable destinada a ser utilizada en combinación con equipos de fotopolimerización extra-oral. Adecuado para la fabricación tanto de prótesis completas o parciales removibles como de bases protésicas funcionales. **ACRY Print 3D RU-004 Denture HI** se compone de resinas funcionales de metacrilato, iniciadores, colorantes y estabilizadores.

Embase: 1000g

Color: Naranja-Rosa

Ventajas

Alta precisión de ajuste

Alto impacto

MD

CLASSE IIA



RU-005 Guide

Cod. producto: 0220005

Resina fotopolimerizable destinada a ser utilizada en combinación con equipos de fotopolimerización extraoral. Adecuado para la fabricación de plantillas quirúrgicas y planos de mordida protésicos y ortodónticos. **ACRY Print 3D RU-005 Guide** se compone de resinas funcionales de metacrilato, iniciadores, colorantes y estabilizadores.

Embase: 1000g

Color: Transparente

Ventajas

Estiramiento excepcional

Alta transparencia

Alta estabilidad UV

Control óptico óptimo

Esterilizable

MD

CLASSE IIA





MATERIALES CAD-CAM

Ruthinium Disc

Discos de PMMA para el mecanizado CAD-CAM de puentes y coronas provisionales, realizados con resina de alto peso molecular cross-linked, que garantiza fidelidad en la reproducción de los detalles y resistencia incluso con espesores sutiles.

Ventajas:


- Alta reproducción de los detalles en el fresado
- Ausencia de astillas incluso en capas físimas
- Resistencia a la abrasión
- Fluorescencia
- Completamente calcinable, no deja residuos
- Estabilidad cromática y ausencia de cualquier tipo de porosidad
- Biocompatibilidad de los materiales



Producto	Código	Producto	Código
Ruthinium Disc	7900087	Ruthinium Disc A	7900089
Ruthinium Disc Multilayer	7900088	Ruthinium Disc A Multilayer	7900090

RuthiniumDISC Ruthinium Disc Monocromático	
Colores	A1 – A2 – A3 – A3,5 – B1 – B2 – C3 PINK – TRANSPARENT – RX
Tamaños	Ø 98,5 mm Ø 95 mm Ø 72 mm
Espesor	16 mm – 20 mm – 25 mm

DISC MULTILAYER Ruthinium Disc Multilayer	
Colores	A1 – A2 – A3 – A3,5 – B1 – B2 – C3
Tamaños	Ø 98,5 mm Ø 95 mm Ø 72 mm
Espesor	16 mm – 20 mm – 25 mm

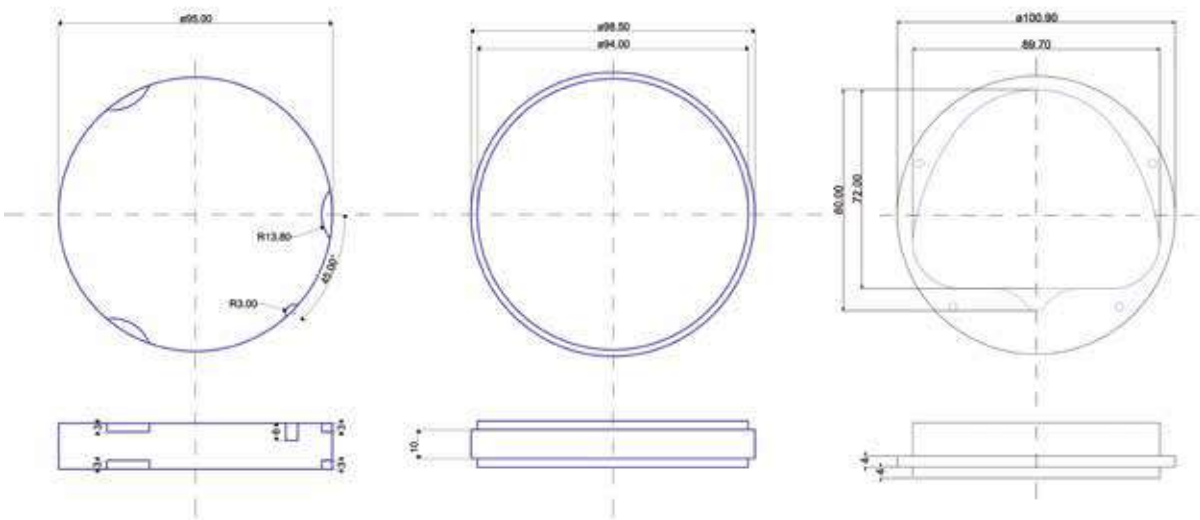

Ruthinium **DISC** easy

DISPOSITIVO
SANITARIO



MÁS BLANDO. MÁS MALEABLE.

La calidad de siempre.

Hemos acogido la demanda de un material CAD-CAM más versátil y fácil de trabajar. La comparación con nuestros otros DISC evidencia un disco más blando y apropiado para elaboraciones provisionales CAD-CAM.

Producto

Ruthinium Disc Easy

Código

7900095

ESPECIFICACIONES



PACKx5

Producto comercializado en
bolsa de 5 unidades.
5 instrucciones incluidas.

CLASE I

Fabricado por
PROVISIONALES

COLORES DISPONIBLES

A2 - A3

ESPESORES DISPONIBLES

16mm

20mm

FIJACIÓN
ESTÁNDAR
98,5mm



Stumps Rock



Gesso extra duro per monconi tipo IV (ISO 6873)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rapporto miscelazione	100 g polvere/ 20 ml acqua
Tempo di miscelazione	30 sec (miscelazione meccanica) 60 sec (miscelazione manuale)
Tempo di presa	ca. 9 min.
Espansione di presa dopo 2 ore	inferiore a 0,10%
Resistenza alla compressione dopo 24 ore	min. 60 N/mm ²
Durezza dopo 24 ore	min. 250 HV/mm ²
Temperatura di lavorazione	app. 23°C
Tempo di lavorazione	app. 4,5 min
Evitare il lungo contatto con l'aria in seguito all'apertura della confezione	

Extra hard gypsum for stumps type IV (ISO 6873)

TECHNICAL FEATURES	
Mixing ratio	100 g powder/ 20 ml water
Mixing time	30 sec (mechanical) 60 sec (manual)
Setting time	ca. 9 min.
Setting expansion after 2 hours	less than 0.10%
Compressive strength after 24 hours	min. 60 N/mm ²
Hardness after 24 hours	min. 250 HV/mm ²
Working temperature	app. 23°C
Working Time	app. 4.5 min.
Avoid contact with the air after unpacking	

Dental Manufacturing S.p.A.
Via Ca' Magnola Nuova, 1699 - Botta Polesine (RO) ITALY
Tel. (+39)0425.516.28 - 0425.590.587 - fax (+39)0425.590.156
info@rutinium.it - www.rutinium.it

5 Kg

YESOS

Ruthinium Stone 3

Yeso duro tipo III (ISO 6873) utilizado para la elaboración de modelos de estudio, antagonistas, técnica de enmuflado.

Color: amarillo

Composición: envases de 25kg

Producto	Código
Ruthinium Stone 3	25 Kg 2230001



Hardstone

Yeso duro tipo III (ISO 6873) utilizado para la elaboración de modelos de estudio antagonistas, técnica de enmuflado.

Mayor dureza y resistencia a la abrasión con modelos de alta calidad.

Color: amarillo

Composición: 25kg bolsa, envase de 5kg

Producto	Código
Hardstone	5 Kg 2290002
Hardstone	25 Kg 2290003



Ruthinium Stone 4

Yeso extra duro tipo IV (ISO 6873).

Para la preparación de muñones y modelos antagonistas. Excelentes resultados en la realización de modelos para prótesis móviles y esqueléticas. Alta resistencia a la abrasión.

Color: brown

Composición: 25kg bolsa, envase de 5kg

Producto	Código
Ruthinium Stone 4	5 Kg 2420001
Ruthinium Stone 4	25 Kg 2430001



Acry Film

Aislante para yeso de fácil y fuerte absorción y resistente a despegarse.

Seca rápidamente dejando una fina y resistente película entre la resina y el yeso. La solución penetra profundamente en el yeso obstruyendo todas la microporosidades del modelo sin provocar ninguna variación dimensional.

Producto	Código
Acry Film	250 ml 0170001
Acry Film	500 ml 0160001
Acry Film	1.000 ml 0150001
Acry Film	5.000 ml 0150002



Silicon Film

Isolante siliconico per addizione a bassa viscosità per isolamento di gesso-resina, resina-resina, metallo-resina, gesso-composito. Crea una pellicola incolore ed inodore resistente e sottile.

Producto	Código
Silicon Film	50 ml 2170001



PRODUCTOS PARA DUPLICACIÓN

Labor Mass

Silicona por condensación para laboratorio. 85Sh.A.

Indicaciones:

- reparación y realización prótesis
- mascarillas de resina
- duplicado de modelos
- separación dientes-yeso en mufla

Características:

- blando en fase de mezcla
- ausencia de reacción con la resina
- excelente estabilidad dimensional
- óptima resistencia al calor

Producto	Código	
Labor Mass	5 Kg	2180004
Labor Mass + 3 Cat.	5 Kg	2180006



Labor Mass Hard

Silicona por condensación para laboratorio.
Mayor dureza y rigidez, 95Sh.A.

Indicaciones:

- reparación y realización prótesis
- mascarillas de resina
- duplicado de modelos
- separación dientes-yeso en mufla

Producto	Código	
Labor Mass Hard	5 Kg	2180005
Labor Mass Hard + 3 Cat.	5 Kg	2180007



Activator Paste

Catalizador en gel.

Envase de 60 ml.

Producto	Código	
Activator Paste	60 ml	2150001



Stargel HP Hard

Silicona 23Sh.A la duplicación de modelos, compatible con todo tipo de yeso, revestimiento o resina para vertido.

Muy elásticas, elevada resistencia a los golpes, máxima precisión. Para toda técnica de duplicación.

Composición: 1kg+1Kg y 5Kg+5Kg.

Producto	Código	
Stargel HP Hard	2 Kg	3520003
Stargel HP Hard	10 Kg	3520005



Duplistar 90

Silicona de adición para la preparación de máscaras de control, llaves de registro oclusal, duplicación de prótesis totales y parciales, máscaras para la preparación de provisionales, estampa de cerámica, contramolde en mufia.

- Dureza: 90Sh.A
- Extra-rigido

Producto		Código
Duplistar 90	1,5+1,5 Kg	2180009
Duplistar 90	5 + 5 Kg	2180011



Stargel

Gelatina para la duplicación de modelos de revestimiento para Cromo cobalto.

Caracterizado por un bajo punto de fusión (80°) se puede emplear con todos tipos de fusores o al baño maría.

Elasticidad y fluidez son garantía de precisión en la duplicación. Se puede volver a utilizar al menos 10 veces.

Producto		Código
Stargel	4 Kg	3540001
Stargel	10 Kg	3550001
Stargel	20 Kg	3550002





REVESTIMIENTOS Y PREFORMAS

Casting Investment Fine

Revestimiento a base silicio.

Polvos obtenidos de materias primas de origen Europeo. Indicado para la técnica de expansión libre. Máxima precisión y oxidación reducida de las aleaciones de cromo cobalto fundidas.

- Temperatura máxima de calentamiento 1.150°C
- Tiempo de elaboración 10-15 min
- Tiempo de endurecimiento 20-30 min

Producto	Código
Casting Investment Fine	20 Kg 3470002



Líquido A+B

Líquido para Casting Investement Fine en solución alcohólica a base silicio.

Legante extrafuerte que consiente la creación de cilindros en ausencia de anillo de contención.

Producto	Código
Líquido A+B	3.000 ml 3200007



Cromo Casting Fast

Revestimiento fosfático para fusiones en cromo cobalto.

Alta precisión, resistencia y simplicidad de empleo sea en la técnica rápida que en la convencional.

Composición de 20Kg en bolsas de 400g.

Producto	Código
Cromo Casting Fast	20 Kg 3770002



Kera Casting Fast

Revestimiento fosfático para puentes y coronas, cerámica presable y disilicato de litio. Empleo para técnica rápida que para la convencional.

Caracterizado por una granulometría fina y sin grafito, garantiza la reproducción de los detalles más pequeños. Idóneo para todos los tipos de fusión en prótesis fija (aleaciones nobles, metal-cerámica, aleaciones de paladio y aleaciones económicas).

Composición de 4.480g en bolsas de 160g

Producto	Código
Kera Casting Fast	4.480 g 4150001



Ruthinium Liquid


Líquido expansor para Chromo Casting Fast y Kera Casting Fast.

Producto	Código
Ruthinium Liquid	750 ml 3810001
Ruthinium Liquid	1.000 ml 3850001
Ruthinium Liquid	5.000 ml 3860001



Plastiform

Preformas de plástico empleadas para modelar la prótesis móvil esquelética. En la fase de calentamiento en el horno no dejan residuos garantizando una fusión en ausencia de imperfecciones. Disponibles en 56 formas distintas para satisfacer cada tipo de exigencia de trabajo. Composición de 10 blister.

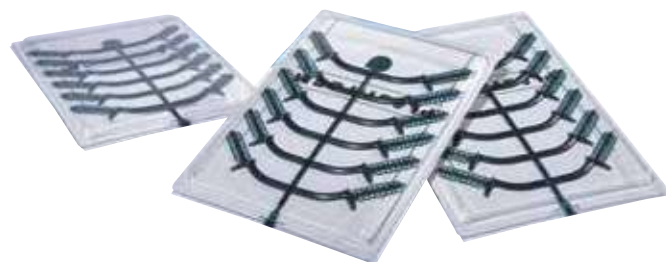

Plastiform B1 10 u. 3100B1



Plastiform B2 10 u. 3100B2



Plastiform B3 10 u. 3100B3



Plastiform B4 10 u. 3100B4



Plastiform B5 10 u. 3100B5



Plastiform B6 10 u. 3100B6



Plastiform BC0 10 u. 3100BC0



Plastiform BC1 10 u. 3100BC1



Plastiform BC2 10 u. 3100BC2



Plastiform BD1 10 u. 3100BD1



Plastiform BD2 10 u. 3100BD2



Plastiform BL1 10 u. 3100BL1



Plastiform BL2 10 u. 3100BL2



Plastiform BP0 10 u. 3100BP0



Plastiform BP1 10 u. 3100BP1



Plastiform BR1 10 u. 3100BR1



Plastiform BR2 10 u. 3100BR2




Plastiform CD1 10 u. 3100CD1



Plastiform CD2 10 u. 3100CD2



Plastiform CR1 10 u. 3100CR1

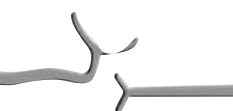

Plastiform CRC 10 u. 3100CRC



Plastiform FC0 10 u. 3100FC0



Plastiform FC1 10 u. 3100FC1



Plastiform GC1 10 u. 3100GC1























Plastiform GC2 10 u. 3100GC2



Plastiform GC3 10 u. 3100GC3



Plastiform GC5 10 u. 3100GC5

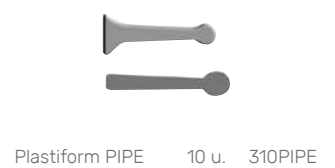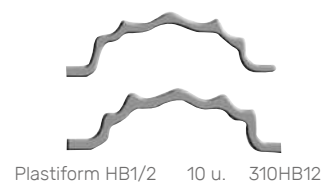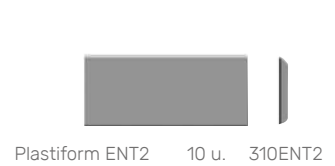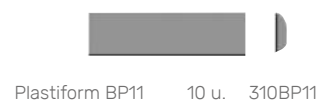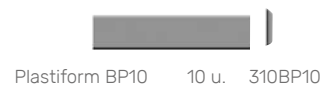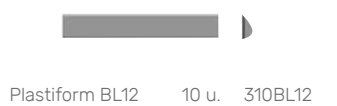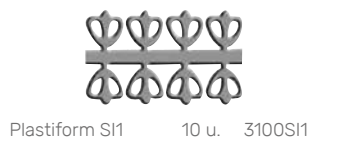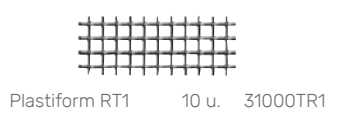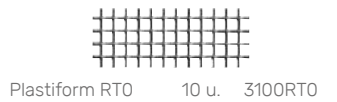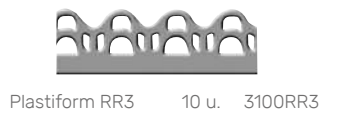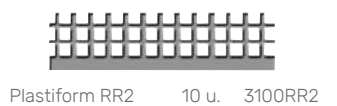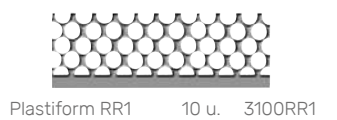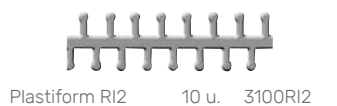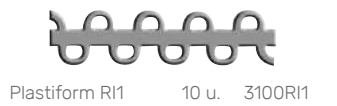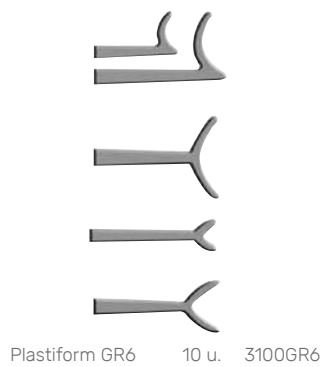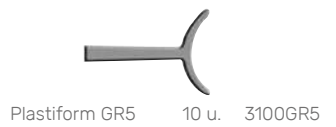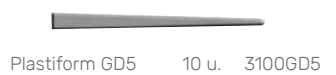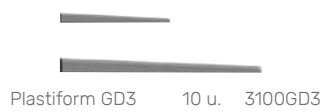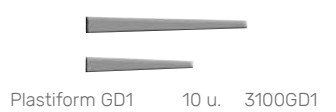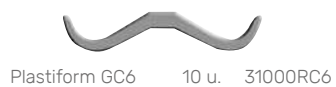



ABRASIVOS Y PRODUCTOS PARA ACABADO

Cepillos

Cepillos para el acabado de aleaciones y resinas dentales.

Cuerpo central de madera, óptima resistencia.

Cerdas de color negro. Ø 80 mm

Producto		Código
Cerdas convergentes	5 u.	5480002
Cerdas paralelas	5 u.	5490002



Cepillos con centro metálico

Cepillos con un rango de cerdas para pulir aleaciones y resinas dentales.

Disponibles con color negro, blanco y pelo de cabra. Diámetro 50 mm.

Composición de:

- 5 piezas

Producto		Código
Cepillos Color Negro	5 u.	5510002
Cepillos Color Blanco	5 u.	5520002
Cepillos Pelo de Cabra	5 u.	5530002



Cepillo

Cepillo de cerdas negras para limpiar los lugares de trabajo.

Largo total 200mm y largo de las cerdas 47mm.

Producto		Código
Cepillo 200x47 mm		5560001



Metalux

Pasta para el abrillantado y el desbaste de los metales.

Producto		Código
Metalux Verde	1.000 g	5570001
Metalux Verde	500 g	5580001



Acry Lux Pasta

Pasta abrasiva indicada para una perfecta limpieza y pulido de las resinas dentales.

Producto	Código	
Acry Lux Pasta	1.000 g	5650001
Acry Lux Pasta	500 g	5660001



Acry Lux Crema

Crema para abrillantar las resinas dentales.

Producto	Código	
Acry Lux Crema	250 g	5680001
Acry Lux Crema	100 g	5690001



Acry Lux Líquido

Líquido para abrillantar las resinas dentales.

Producto	Código	
Acry Lux Líquido	1.000 ml	5700001
Acry Lux Líquido	250 ml	5710001



Pómez

Pómez lávica de extracción italiana con pureza máxima y granulometría extra-fina.

Se utiliza para las operaciones de alisado de prótesis totales o parciales móviles.

Producto	Código	
Pómez	5 Kg	5720001
Pómez	10 Kg	5730001
Pómez	20 Kg	5750001





CERAS

Ceras

Hartiwx

Valles oclusales de cera rígida de color beige.

Se caracterizan por la morfología curva que sigue la inclinación y el grosor de los dientes naturales.

Producto	Código
Hartiwx	36 u. 6100001



Cera calibrada

Cera calibrada en láminas para el modelado de placas esqueléticas.

Disponibles en las versiones lisa y rugosa. De notable maleabilidad y resistencia, no deja residuos en el colado.

Producto	Código
Cera Calibrada Lisa	0,3 mm 10 u. 6140001
Cera Calibrada Lisa Wax	0,4 mm 10 u. 6140002
Cera Calibrada Lisa Wax	0,5 mm 10 u. 6140003
Cera Calibrada Lisa Wax	0,6 mm 10 u. 6140004
Cera Calibrada Lisa Wax	0,7 mm 10 u. 6140005
Cera Calibrada Lisa Wax	0,8 mm 10 u. 6140006
Cera Calibrada Rugosa Wax	0,3 mm 10 u. 6150001
Cera Calibrada Rugosa Wax	0,4 mm 10 u. 6150003
Cera Calibrada Rugosa Wax	0,5 mm 10 u. 6150004
Cera Calibrada Rugosa Wax	0,6 mm 10 u. 6150005



Tenasyle

Cera rosa en láminas para modelar.

Adecuada para modelar prótesis móviles, adaptada para todas las estaciones del año.

Calentándola se adapta fácil y rápidamente a la forma del modelo.

Producto	Código
Tenasyle	500 g 6170006





DIGITAL

La nueva era digital empieza aquí

Hemos creado un sistema digital completo para llevar el proceso cotidiano de diseño y construcción de las prótesis dentales hacia el futuro.

De la presentación fotográfica de la sonrisa a la finalización del proyecto de prótesis con nuestro Ruthinium® ACRYSMART, conseguir que el paciente esté satisfecho nunca ha sido tan fácil y rápido.

Nuestro PROYECTO DIGITAL

Creemos en el talento manual

Los protésicos dentales y su talento manual son la fuerza motriz hacia un futuro de prótesis altamente funcionantes y estéticamente extraordinarias.

Creemos que lo digital es un instrumento

Para que la comunicación entre el protésico dental, el dentista y el paciente progrese.

Para tranquilizar a los pacientes con presentaciones creíbles de sus prótesis.

Para acortar la distancia entre el prototipo y el resultado final.

Para que los costes y los plazos en el proceso de creación de las prótesis sean más eficientes.

Para unir la experiencia tradicional y un enfoque tecnológico..

Queremos guiar como protagonistas el sector dental en el futuro

MÁS TIEMPO PARA TU ARTE

Ahorra tiempo en prototipos e intentos

FÁCIL ENFOQUE DIGITAL

Ninguna curva de aprendizaje, un digital diseñado para el sector dental

FÁCIL MONTAJE

Con denture guides y colocaciones preajustadas, para ayudar a los protésicos dentales y los dentistas

El flujo digital Ruthinium



Producto	Código
Ruthinium Digital Preview	7910001
Ruthinium 3D Denture Guide	7910001
Librería Denti Acry Smart	7920001



Ruthinium Digital Preview es un editor fotográfico que permite a los usuarios visualizar en primicia de forma rápida y realista los proyectos de prótesis dental directamente en los rostros de los pacientes. Es un instrumento de comunicación entre el dentista y el protésico dental y un instrumento de diagnóstico entre el dentista y el paciente.

Gracias a un sencillo protocolo y un software intuitivo, Ruthinium Digital Preview permite a los dentistas mostrar a los pacientes una presentación fotográfica de su sonrisa en tan solo 1 hora y media.

**PRESENTACIÓN
EN SOLO
1 HORA**




**Importa tu proyecto 2D.
Monta fácilmente en 3D.
Crea tu Denture Guide.**

Ruthinium 3D Denture Guide es un software 3D guiado que ayuda al protésico dental a colocar correctamente los dientes acrílicos en el proyecto de prótesis para un paciente edéntulo, permitiendo ver el resultado de colocación directamente en el rostro y en la boca del paciente.

El software combina una presentación fotográfica y una colocación 3D precisa del diente para imprimir una Denture Guide lista para instalar con facilidad los dientes.

PATENTADO

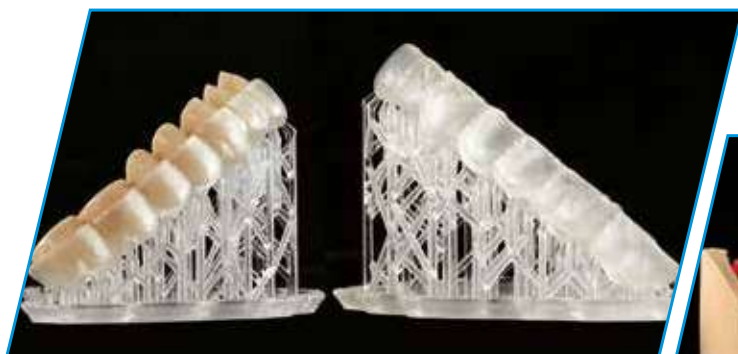

WE TAKE
CARE
OF YOUR
SMILE

info@ruthinium.it
ruthinium.it

Ruthinium®

Dental Manufacturing S.P.A.

Via Cà Mignola Nuova, 1699 - 45021 Badia Polesine (RO)

P.IVA 01039350291 CF 01058640283

Tel. +39 0425 51628