


**miglionico**  
DENTAL EQUIPMENT

## NUEVAS LÍNEAS TOMAN FORMA

*PRESENTACIÓN DE LA NUEVA LÍNEA  
DE EQUIPOS DENTALES*

**NT NG**

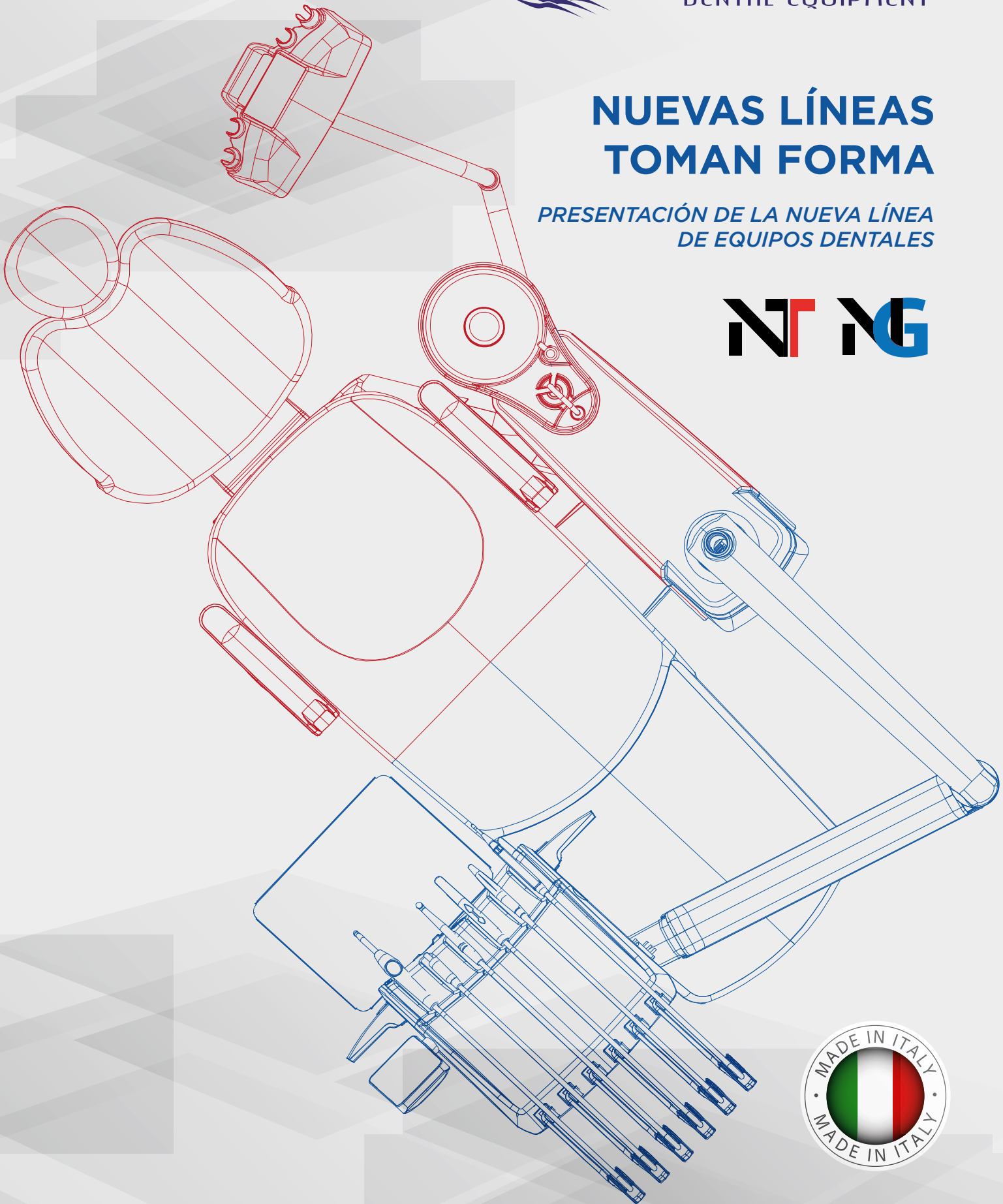



## MOVIMIENTOS DEL SILLÓN

Nuestro sillón, además de ser ergonómicamente más confortable, se mueve de forma rápida y silenciosa. Respaldo y asiento se mueven de forma sincronizada para un mayor confort y para alcanzar la posición de Trendelemburg.

## LA PANTALLA TOUCH

Gracias al panel de control en color con superficie de vidrio de 7", controlar el equipo nunca ha sido tan fácil. La tecnología touch permite controlar el equipo de forma muy sencilla e inmediata y de desenvolverse ágilmente entre todas las funcionalidades y los parámetros disponibles.



La nueva línea de equipos dentales se basa en una larga y minuciosa búsqueda de las necesidades de los usuarios finales, intentando al mismo tiempo satisfacerlos y anticipar soluciones. Nuestra novedad es el uso de plástico de nueva generación específico para el sector medical:

un material más flexible que hace el uso del equipo más ligero. Gracias a esto, hemos logrado reducir los volúmenes, estudiando cuidadosamente cada línea y dando vida a formas más ergonómicas y cómodas para el asiento y el respaldo.

Nuestro plástico de nueva generación específico para el sector medical es:

- resistente a los productos químicos y antibacterianos;
- resistente a los rayos ultravioleta (anti amarilleo).

***ERGONOMÍA  
& DISEÑO  
INNOVADOR***





## CONSOLA OPERADOR

La consola operador también cambia su forma y material.

Ahora es más eficiente y fácil de higienizar.

El movimiento vertical del brazo alcanza los 600 mm.

Otra novedad es el sistema colibrí, que

es más articulado y sigue al operador en todas las direcciones sin tener que mover la consola.

Los instrumentos regresan a su alojamiento automáticamente con un sistema de alineación mecánico patentado.





## GRUPO DE VÁLVULAS

En el grupo hídrico hay un cómodo compartimento dedicado al nuevo grupo de válvulas, más eficaz que el anterior, para minimizar las operaciones de mantenimiento.

## CONSOLA ASISTENTE

Líneas más definidas para la consola asistente, articulada sobre dos brazos y que, con el material plástico de última generación, es muy ligera de mover.

4  
5





## GRUPO HÍDRICO

El grupo hídrico ha sido completamente renovado para ser aún más funcional: los compartimentos son separados (parte hídrica, parte eléctrica y sistemas de aspiración y desinfección), cada uno con su abertura. El interior del grupo hídrico es muy fácil de

inspeccionar tanto por los técnicos como por los dentistas, ya que se ha expandido su espacio.

Los tubos de aspiración ahora son independientes y cada uno con su filtro.



## PEDAL

El pedal ha sido actualizado y modernizado según las exigencias del mercado. Este elemento también está hecho de plástico muy resistente a las tensiones mecánicas y al desgaste.

Tiene también un mango retráctil para levantarlo, que se puede bajar con el pie o levantar si hay que moverlo.



6  
7

## DESINFECCIÓN

Todos los procedimientos para la desinfección son simples, rápidos y eficaces. Cada elemento removible se puede autoclavar.

## SISTEMAS DE LOS CIRCUITOS HÍDRICOS

Nuestros sistemas de alimentación hídrica son: agua de red, botella de 2 litros, MDS básico, MDS+ y MDS+17.



**NT<sub>P</sub>** **NG<sub>P</sub>**

Los modelos NT y NG pueden también tener versiones de mangueras colgantes, llamadas

**NT<sub>P</sub>** y **NG<sub>P</sub>**

- 6 instrumentos en la consola operador;
- la alfombrilla de silicona es autoclavable y cubre toda la consola. Hay también la posibilidad de añadir otra bandeja adicional para tener una superficie de apoyo más amplia;
- el brazo se mueve en vertical hasta alcanzar los 600 mm;
- la consola operador es orientable;
- los soportes para las piezas de manos son autoclavables.







En las imágenes se muestra la versión NGpx.



1.



Los modelos NT y NG tienen también una versión ambidiestra, que se reconoce gracias a un sufijo, o sea  y .

**VERSATILIDAD  
&  
CONFORTABILIDAD**



2.



3.



Estas variantes están caracterizadas por una estructura independiente formada por dos articulaciones y dos brazos que giran 180°. De esa manera, el equipo puede ser utilizado tanto por dentistas diestros como por zurdos. Es muy fácil de mover y la estructura es muy ligera.

El sillón es más confortable, ya que se utiliza el memory foam. El sistema hídrico, el pedal y todos los otros componentes son los mismos que en los modelos NT y NG.



# miglionico

DENTAL EQUIPMENT

*Miglionico S.r.l.*  
*Via Molise, Lotti 67/68 Z.I.*  
*70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - ITALY*  
*P. Iva: 05306940726*  
*Tel +39 080 759552*  
*Fax +39 080 2220970*

[www.miglionico.es](http://www.miglionico.es)

