


DISEÑADO PARA LA PRÁCTICA DENTAL INNOVADORA

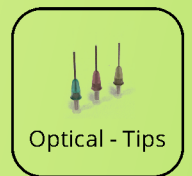

 **PRIMO**

Tecnología láser de diodo para dentistas e higienistas

SIMPLEMENTE EXTRAORDINARIO

PRIMO es la combinación perfecta entre la tecnología láser de diodo de última generación y la experiencia de MEDENCY en el campo dental.

PRIMO ofrece una multitud de aplicaciones como alternativa ideal a los métodos quirúrgicos convencionales como la electrocauterización y el bisturí. Gracias a su interfaz intuitiva, todos los dentistas podrán acceder a los beneficios de los láseres de diodo.

Versatilidad de uso sin precedentes y bajos costos operativos. Ideado, diseñado y fabricado con pasión y compromiso en Italia.



 **PRIMO**



Cirugía



Endodoncia



Periodoncia

El concepto de diseño de Medency se basa en una funcionalidad extrema que mantiene las líneas modernas y ergonómicas de los objetos.

EN SU NEGOCIO DEBE TOMAR LAS DECISIONES CORRECTAS

Valor para su trabajo y consultorio.

- Unidad portátil que funciona con baterías y pedal inalámbrico.
- Botones anchos y con iconos distinguibles.
- Software intuitivo.
- Master Mode diseñado para expertos
- Configuración ajustable para todo tipo de tejido.
- Control de energía directa desde la pantalla principal
- Más de 30 protocolos establecidos incorporados.
- Procedimientos exclusivos en cirugía, implantología y cosmética.
- Fibra flexible, puntas ópticas y accesorios versátiles.
- Diseño ergonómico moderno que garantiza mayor eficacia.
- Elegante pieza de mano esterilizable en autoclave

SLEEK AUTOCLAVABLE HANDPIECE



Terapia

Implantología

Cosmética



ENDODONCIA

Punta óptica 200µm

Las PUNTAS DE ENDODONCIA están desarrolladas para ser extremadamente flexibles y con de longitud para llegar a las zonas más difíciles dentro del conducto radicular.

Tratamientos preestablecidos: Reducción del nivel bacteriano (descontaminación) en conducto radicular, Pulpotomía

CIRUGÍA

Punta óptica 300 µm

Las PUNTAS DE CIRUGÍA son resistentes para mantener un control efectivo durante corte. Su ajuste es perfecto para hacer frente a diferentes condiciones de corte de una manera menos invasiva que los métodos tradicionales. Estas características permiten a los Especialistas evitar el riesgo de propina. rotura durante ciclos de operación o esterilización.




Tratamientos preestablecidos: Absceso, Gingivectomía, Despigmentación, Épulis, Fibroma, Frenectomía, Granuloma, canal gingival para impresiones de coronas, Hemangioma, Descubrimiento de implantes, Mucocele, Opercolectomía

PERIODONCIA

Punta óptica 400 µm

Los TIPS DE PERIODONCIA tienen una extraordinaria elasticidad y resistencia para ser utilizados dentro del bolsa gingival y disminuir la presencia de bacterias y virus. Descontaminación láser proporciona resultados superlativos, especialmente en comparación con los métodos tradicionales.

Tratamientos preestablecidos: desbridamiento sulcular eliminación activa de tejidos blandos enfermos e infectados dentro. El bolsillo periodontal, descontaminación del bolsillo gingival, mejora el índice de sangrado gingival y estabilidad dental.

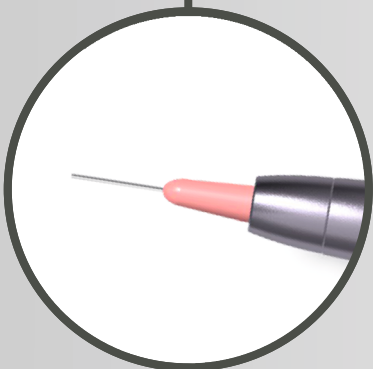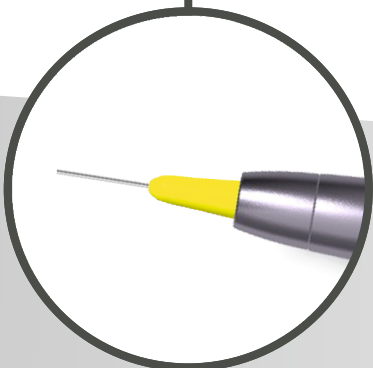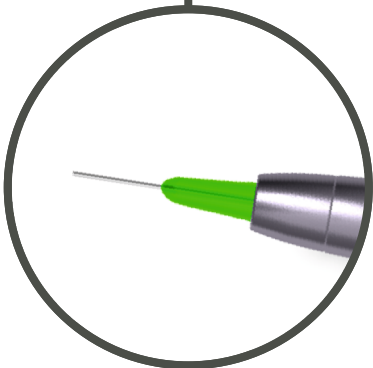

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS

TERAPIA EXTRAORAL



La pieza de mano BELL es un accesorio extraoral para usar en contacto con el tejido. Es adecuado para tratar todos los post-operatorios. Inflamaciones y dolores asociados y es una solución eficaz para los trastornos temporomandibulares (TMJ). El diámetro del punto del haz es de 22 mm.

Tratamientos preestablecidos: ATM: alivio temporal del dolor y la rigidez de las articulaciones, manejo del dolor (alivio del dolor, analgesia, control del dolor).

TERAPIA INTRAORAL



La pieza de mano BIO es un accesorio intraoral desarrollado para proporcionar terapia láser incluso en las zonas más distales de la boca. Las características de la herramienta le permiten ser una solución versátil para bioestimulación, cicatrización de heridas, aplicaciones de PDT y puntos gatillo.

Tratamientos preestablecidos: Analgesia, aftas, fisuras, úlceras, desensibilización, Leucoplasia

BLANQUEAMIENTO



La pieza de mano BLANQUEAMIENTO está dedicada principalmente a los procedimientos de blanqueamiento. El arco ancho permite cubrir completamente cada cuadrante de la boca, brindando la mejor entrega de luz láser de la manera más rápida.

Tratamientos preestablecidos: Activación rápida de todos los materiales blanqueadores para el blanqueamiento dental

DESCUBRE LOS BENEFICIOS DE ODONTOLOGÍA LÁSER

La odontología láser ofrece varias ventajas sobre las técnicas dentales tradicionales. Muchos pacientes experimentan menos molestias con la odontología láser, tanto porque se experimenta menos dolor como porque los láseres dentales funcionan más silenciosamente que otras herramientas. Algunos procedimientos pueden realizarse sin anestesia.

Los procedimientos comunes de láser dental incluyen:

- **Retirar y dar forma al tejido** de las encías sin sangrado, hinchazón ni infecciones.
- **Blanqueamiento dental con láser** que acelera el proceso durante las sesiones de blanqueamiento dental.
- **Eliminar bacterias y regenerar** bolsas afectadas por enfermedades periodontales
- **Reducir el dolor** asociado a las aftas bucales y otras lesiones orales
- **Ayudar a regenerar** tejidos sanos, nervios y cicatrices
- **Terapia de la articulación mandibular** para reducir el dolor y la inflamación en la articulación.
- **Odontología pediátrica** y liberación de la lengua para mejorar el habla y la alimentación
- **Procedimientos cosméticos** para la transformación completa de la sonrisa

LA MEJOR ATENCIÓN,
AQUÍ Y AHORA!





TODO LO QUE NECESITA ES PRIMO LÁSER DENTAL

PRIMO ofrece una amplia gama de seguros y probados parámetros preestablecidos para experimentar el mejor láser de diodo todo en uno para la práctica diaria.


- amplia pantalla táctil diseñada para una interacción rápida
- selección de un solo toque para una fácil activación
- barra de color intuitiva para detección rápida de energía
- ajuste rápido de la configuración de potencia
- acceso rápido a los tratamientos favoritos

No importa su nivel de experiencia, desde principiante hasta usuario avanzado, Primo es el dispositivo ideal para todos los dentistas.

MASTER MODE

Este dispositivo láser cuenta con el software **Master Mode** para el mejor avance clínico.

PRIMO es un instrumento muy versátil y productivo que da al usuario más experto la posibilidad de ajustar todos los parámetros.

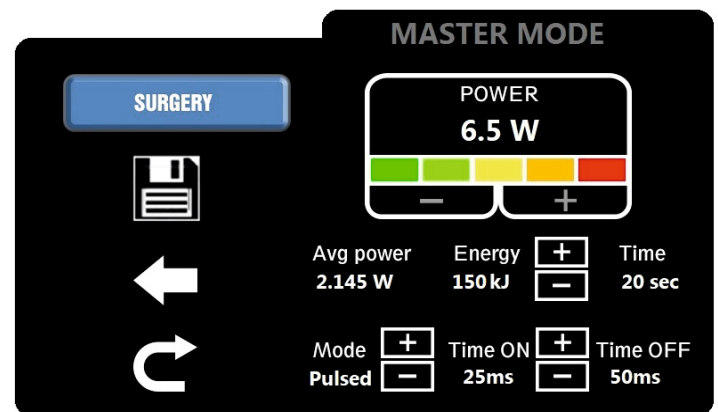

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN

Portabilidad con una batería de iones de litio permitiendo total libertad para utilizar el dispositivo en cualquier habitación. Pie automático conexión de pedal, disponible tanto inalámbrico y con cable.



FORMACIÓN DE CLASE MUNDIAL

La variedad de aplicaciones para el láser dental sigue creciendo.

Gracias a la ciencia y la formación educativa operativa, el tratamiento con láser se puede aplicar con mayor facilidad. Medency proporciona certificación láser con el apoyo de las mejores academias y universidades del campo. Aumente la confianza en las nuevas tecnologías y ofrezca lo más moderno en sus instalaciones.

PRIMO Láser De Diodo



Código
Longitud de onda
/ potencia*
Frecuencia
Modo de pulso
Rango de pulso
Clase médica/láser
Dimensiones/ Peso

LAMED00X.x
980nm @ 10W
810nm @ 7W
Up to 25 kHz
Continuo - Pulso múltiple
20µs up to 1s
IIB / 4
205x130x50mm / 1.5kg

**Modelos variables*

Medency Primo es un dispositivo médico CE con marca CE, de acuerdo con las directivas CEE para dispositivos médicos: Directivas CEE 93/42. Todos los productos de Medency están hechos en Italia.

CE
0476



MEDENCY Srl *Vicenza Italy*

Tel +39 0444 371462

info@medency.com | www.medency.com



TienDental

SU PROVEEDOR LOCAL



medency.com

Sólo para profesionales médicos. ©2018 MEDENCY. Todos los derechos reservados. Código DPDENS01 rev.03

medency.com

