

OFERTAS

OTOÑO 2024

Su distribuidor de confianza:

▶ ESCALADOR ULTRASÓNICO CON AEROPULIDOR | PT-A

¡SOLO PARA LOS MÁS EXIGENTES!

DIFERENCIATE DEL RESTO Y OFRECE LO MEJOR A TUS PACIENTES

- Amplia pantalla táctil.
- 12 niveles de regulación de caudal y potencia.
- Calentador de agua ▶ Máxima comodidad para el paciente.
- Pedal multifunción.
- Con luz LED.
- Suministro de agua: **autónomo y red.**

1.- ESCALADOR ULTRASÓNICO: exclusiva tecnología "**Painless**" para tratamientos indoloros. **3 programas:** Profilaxis, periodoncia y endodoncia. Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz.** y 90 µm. de amplitud.

2.- AEROPULIDOR BICARBONATO Y GLICINA
Potente y versátil aeropulidor 2 en 1:
Función Supragingival y Función Subgingival.

- 2 piezas de mano:
- Cabeza **micro** y rotación **360°** ▶ Profilaxis perfecta.
- **Separable** en 3 partes ▶ Mantenimiento óptimo.

Suministro incluye: Maletín metálico de transporte, 4 depósitos, 3 piezas de mano y **MUCHO MÁS...**

Garantía: 24 meses (12 meses piezas de mano)

Ref.: 28-PTA



WOODPECKER



OPCIONAL

CARRITO A MEDIDA
Ref.: 28-CART2



Con **CALENTADOR** de agua

OFERTA
BICARBONATO & GLICINA

65 µm
40 µm
25 µm



3+1**
GRATIS

**Promoción válida en pedidos de la misma referencia.

ABC AIRSTREAM
BIOFILM
CLEARANCE



+ Info

▶ AEROPULIDOR | AP-H & AP-H PLUS

WOODPECKER

AP-2 Plus

2 en 1
Subgingival
y Supragingival

Ergonómico, preciso y ligero (Solo 125gr.).

Con su pieza de mano para tratamientos **SUPRAGINGIVALES AP-1 Plus** limpia y pule los dientes, y con su pieza de mano para tratamientos **SUBGINGIVALES AP-2 Plus** elimina de forma eficaz el biofilm del borde de la zona subgingival y en las bolsas periodontales más profundas.

CARACTERÍSTICAS:

- Pieza de mano **separable en 3 partes** ▶ fácil mantenimiento.
- Diseño **antirretorno de agua y polvos** ▶ para evitar atascos.
- **Cabeza mini con giro de 360°** y diseño estilizado para una visión óptima de la zona de trabajo.
- Diseñado para su uso con polvos de **Bicarbonato y Glicina.**

Pieza de mano AP-1 Plus
(Incluido en AP-H y AP-H PLUS)

- Diámetro de salida del polvo: 0,7mm.
- Diámetro de salida de agua: 1,4mm.
- **Tamaño polvo recomendado: 40 - 65µm.**
- Esterilizable 134°.

Garantía: 12 meses

Pieza de mano AP-2 Plus
(Incluido en AP-H PLUS)

- Salida de polvo en tres direcciones y de agua en una.
- **Punta diseñada para unos resultados únicos:** hecha de polímeros médicos, flexible. elimina la placa en profundidad y fácil accesibilidad.
- **Tamaño polvo recomendado: 25µm.**
- Esterilizable 134°.

AP-1 Plus

Disponibile
con conexión:
Midwest 4 (*M4)
KaVo® Multiflex (*K)
Sirona® R/F (*S)
NSK® PTL (*N)

Ref.: 28-APH*

Ref.: 28-APHPLUS*



RUMAR
mayorista dental

Airstream **B**iofilm **C**learance

MUCHO MÁS que un simple tratamiento de profilaxis...

Ofrece salud, belleza y bienestar

a partir de los 8 pasos del **Método ABC**



**A
B
C**
AIRSTREAM
BIOFILM
CLEARANCE

+ info

Descargar folleto



Unidad de Profilaxis **PT-A (28-PTA)** de Woodpecker® + **Carrito a medida (28-CART2)**

¡Siempre en stock, entrega en 24 horas!

Dispositivos, accesorios, repuestos y servicio postventa

www.rumarcedeira.com | rumarcedeira@rumarcedeira.com

Teléfono: 91 849 01 04 | WhatsApp: 626 327 863

Pregúntanos por tu distribuidor
o servicio técnico más cercano

▶ MOTOR DE ENDODONCIA | Ai MOTOR TERAUCHI BLACK EDITION

¡El motor de los endodoncistas!

Motor brushless ▶ mayor suavidad, rendimiento, precisión y durabilidad.
Incorpora 6 modos de trabajo: el famoso **modo de trabajo T-Mode*** diseñado por el **Dr. Yoshi Terauchi**, **Modo localizador de ápices (EAL)**, **Normal (CW)**, **Reverse (CCW)**, **Reciprocante (REC)** e **Inversión de Torque Adaptativo (ATR)**.

*¿En qué consiste el T-Mode?

Primero se empieza con un modo SGP (Safe Glide Path) diseñado para pasar un ledge o escalón que consiste en un movimiento reciprocante con igual ángulo hacia adelante y hacia atrás. En este podrás fijar ángulo y velocidad de giro. Seguido de un modo a elegir entre (Normal, Reverse, Reciprocante o ATR) Donde podrás definir todos los parámetros propios de cada modo. Empezarás presionando el botón de activación para arrancar en el modo SGP y tras pasar el ledge o escalón, bastará con presionar el botón de activación nuevamente y automáticamente pasarás al segundo modo configurado.

CARACTERÍSTICAS:

- 10 programas memorizables.
- 30 sistemas de limas predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima.
- Ángulo de trabajo ajustable.
- Giro de cabeza de 360°.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-AIMOTORBLACK

- Gran pantalla OLED clara e intuitiva.
- Batería de gran capacidad: 2.000mAh.
- Cabeza super mini: 8mm Ø y 9,7mm de altura.
- Función de calibrado automático.
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustables: 100 a 2.500 rpm.

NO HABRÁ
ESCALÓN / LEDGE
 QUE SE RESISTA.



▶ ULTRASONIDOS | D600 LED

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28 kHz - 31 kHz.
- Movimiento de trabajo: 90um.
- Tecnología **Confortable Scaling**.
- 3 Programas: profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable.
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- Incluye: 7 puntas, llave dinamométrica, llave endo, pedal y pieza de mano.

Garantía: 24 meses (12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: 28-D600 SIN LUZ LED

Ref.: 28-D600LED CON LUZ LED




*Consúltanos por los más de 250 modelos de puntas compatibles que tenemos en Stock.

▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | WOODPEX V

- Conectable a motor Endo Smart Plus
- Pantalla LCD inclinable, luminosa y de fácil lectura.
- Calibración automática.
- Máxima precisión.
- Señal acústica.
- Peso: 336 gr.
- Dimensiones: 89x88x112 mm.
- Incluye: 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable.

Garantía: 2 años en la unidad / 6 meses en accesorios, batería y cargador.

Ref.: 28-WOODPEXV

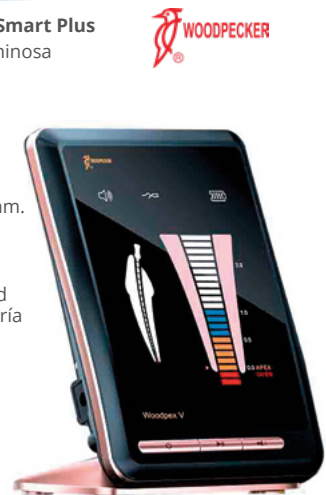

TURBINA | ECO T2

- Cabeza standard
- Sin luz
- Potencia: 21 W
- 340.000 rpm
- Nivel sonoro < 60 dB
- Conexión: Midwest 4
- Orificios de spray: 1
- Recubrimiento: Cromo
- Rodamientos cerámicos

Garantía: 6 meses

2x
 Ref.: 58-250



▶ ENDO ACTIVADOR ULTRASÓNICO | Endo 3

- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema antirrotura.
- Eficaz gracias a la creación de fluido hidrodinámico que mejora el desbridamiento y la desorganización del barro dentinario y el biofilm.
- Display LCD.
- Técnica clínica muy sencilla.
- Aparato intuitivo, muy fácil de usar.
- Ideal cuando se requiere portabilidad.
- Batería: 750mAh.
- Suministro incluye: 3 puntas, llave fija, funda silicona y fundas desechables.

Garantía: 12 meses

Ref.: 28-ENDO3



SOLO 78gr.

▶ LÁMPARA DE FOTOCURADO | O-Star

Lámpara de fotocurado **INALÁMBRICA** capaz de polimerizar **TODAS las resinas del mercado** inclusive las Dentsply, 3M...

- FOTOCURADO en 1 SEGUNDO

7 Programas de trabajo:

- **Turbo:** 1 o 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2)
- **High:** 3 o 5 seg. (1.800-2.000 mW/cm2)
- **Ortho:** 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2) x 5 o 10 ciclos con una sola pulsación.
- **Normal:** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- **Rampa (Soft):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- **Escalonado (Pulse):** 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- **Check:** 30 o 60 seg. (200 - 400 mW/cm2)
- **Rango más amplio de longitud de onda:** 385 - 515 nm (luz azul)
- Display **OLED**
- **Batería de gran capacidad:** 2.000 mAh
- **Dimensiones:** 23x23x204mm
- **Peso:** 108gr
- **Incluye:** Medidor de intensidad de luz en la base de carga.

Garantía: 24 meses



ULTRALIGERA
108gr.



Ref.: 28-OSTAR

▶ MOTOR DE IMPLANTES | Implanter LED PLUS

Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.

- **Pantalla LCD** táctil: amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Potente **micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- **Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- **Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.

- Datos técnicos:

- Par de apriete: 5-80 N.cm
- Refrigeración: 0 - 120 ml/min
- Velocidad del motor: 15-40,000 rpm
- Fuente de alimentación: 220V

Garantía: 24 meses unidad
12 meses micromotor y contra ángulo

Ref.: 28-IMPLANTERLP



▶ Incluye maletín metálico de transporte, contra ángulo LED 20:1 y micromotor LED brushless.



Pantalla Táctil



Bomba peristáltica



Pedal Multifunción

AHORA + PRECISIÓN



▶ LÍNEA DE IRRIGACIÓN

Ref.: 28-WD004

▶ CAPTADOR / SENSOR RADIOLOGÍA DIGITAL | i-Sensor H1 & H2

- Potente software > **Imágenes inmediatas en alta resolución (25 lp/mm)**
- Instalación y utilización en **múltiples puestos de trabajo** (*Misma IP)
- **Compatible** con los principales software del mercado. (Ej.: Twain®)
- Sensor **extrafino y de bordes curvos** > Mayor comodidad

- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Imágenes más claras, ideal para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

Fácil de usar en cualquier dispositivo

- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68

Garantía: 24 meses



FÁCIL DE USAR, FIABLE Y DURADERO



ULTRAFINO
4,4mm

H1

38,5 x 25mm
(962,5 mm²)

Ref.: 28-H1

H2

41 x 31mm
(1.240 mm²)

Ref.: 28-H2