


ELÁSTICOS Y LIGADURAS



K

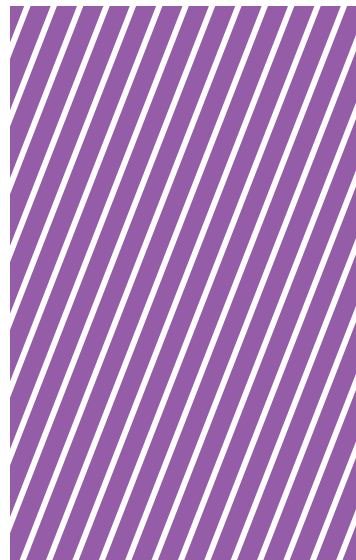

Los elásticos Leone están fabricados con el mejor látex existente.

Las innovadoras ligaduras low friction **SLIDE*** fabricadas con una especial mezcla de poliuretano para el uso medical, permiten aprovechar todas las ventajas biomecánicas de los sistemas de baja fricción, reduciendo los tiempos terapéuticos y la necesidad de extracciones. Están especialmente indicadas para el uso con los brackets Logic Line.

Los módulos para ligaduras Leone están realizados con elastómeros que consienten la máxima elasticidad y resistencia, unidas a una perfecta inalterabilidad a los líquidos orales.

Los alambres para ligaduras metálicas Leone están producidos en aleación fundida al vacío, para garantizar la máxima adaptabilidad y la mayor carga mecánica.

LIGADURAS LOW FRICTION **SLIDE**



LIGADURAS EN MINI MÓDULOS



ALAMBRES PARA LIGADURAS METÁLICAS




*PATENTADO




**LIGADURAS
LOW FRICTION SLIDE**

SLIDE es un dispositivo realizado en una especial mezcla de poliuretano para el uso médico. Se aplica como las ligaduras elásticas tradicionales y, una vez sobre el bracket, realiza una ligadura pasiva sobre el slot, permitiendo al alambre deslizar libremente y actuar sobre las estructuras dentoalveolares. Está especialmente indicada para el uso con los brackets Logic Line, que teniendo un alojamiento sobre las aletas proyectado para acogerla, le permiten integrarse completamente en el perfil del bracket.

Envase: 10 módulos de 6 ligaduras cada uno

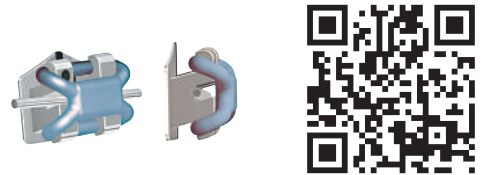

colores	extra-small	small	medium	
	azul	K6254-10A	K6251-10A	K6252-10A
	amarillo	K6254-10G	K6251-10G	K6252-10G
	verde	K6254-10V	K6251-10V	K6252-10V
	blanco	K6254-10	K6251-10	K6252-10
	rojo	K6254-10R	K6251-10R	K6252-10R
	rosa	K6254-10S	K6251-10S	K6252-10S
	negro	K6254-10N	K6251-10N	K6252-10N
	hielo	K6224-10	K6221-10	K6222-10
	plata	K6264-10	K6261-10	K6262-10

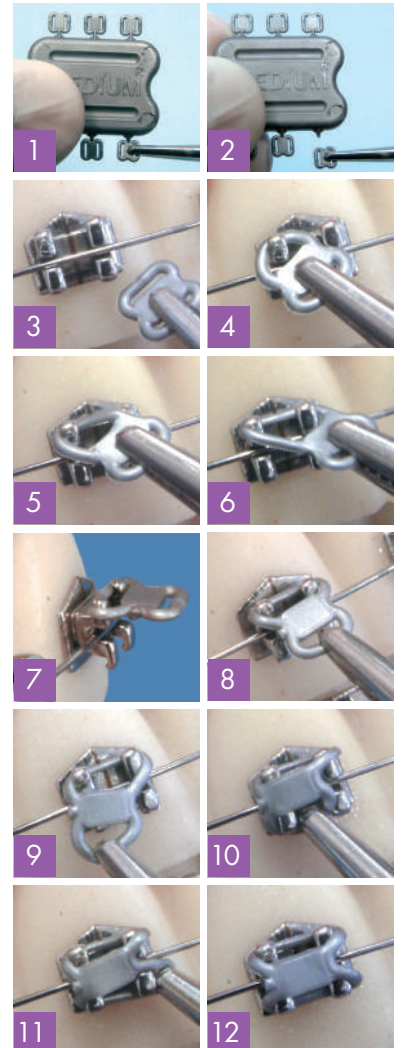


**KIT LIGADURAS SLIDE
COLOREADAS**

K6254-93	extra-small
K6251-93	small
K6252-93	medium

Envase (432 piezas):
72 módulos de 6 ligaduras por 6 colores
(rosa, rojo, blanco, verde, amarillo, azul)

**K6260-95
KIT LIGADURAS
SLIDE PLATA**

Envase (432 piezas):
72 módulos surtidos de 6 ligaduras:
24 extra-small, 24 small, 24 medium

**LIGADURAS LOW FRICTION
SLIDE AQUA**


K6214-10	extra-small
K6211-10	small
K6212-10	medium

Las ligaduras low friction **SLIDE AQUA** gracias a un innovador proceso tecnológico son impermeables a los líquidos orales y más resistentes a la coloración amarillenta en la cavidad bucal, típico inconveniente de los elastómeros transparentes. Además, las ligaduras **SLIDE AQUA** reducen la necesidad de cambios frecuentes y garantizan una estética perfecta. Están especialmente indicadas para el uso con los brackets Logic Line estéticos, (págs. 123-126) que teniendo un alojamiento sobre las aletas proyectado para acogerlas, les permiten integrarse completamente en el perfil del bracket. Color neutro.

Envase: 10 módulos de 6 ligaduras cada uno



Fotografía facilitada por el Doctor A. Fortini

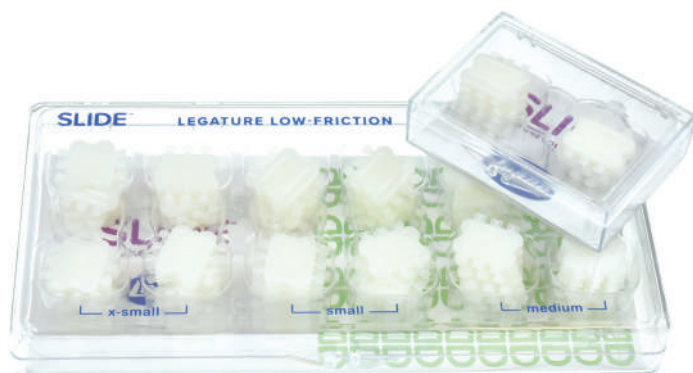
**K6210-93
KIT LIGADURAS
SLIDE AQUA**

Envase (432 piezas):
72 módulos surtidos de 6 ligaduras:
24 extra-small, 24 small, 24 medium

LIGADURAS ELÁSTICAS

Fabricadas con material de altísima retención elástica, usando el método de inyección en moldes de precisión. La sección perfectamente circular facilita la ligadura del bracket. El uso de los mini módulos favorece la prevención de las infecciones.



KIT LIGADURAS ELÁSTICAS COLOREADAS EN MINI MÓDULOS

- K7351-93** diám. int. 1,0 mm - **small**
- K7352-93** diám. int. 1,3 mm - **medium**
- K7353-93** diám. int. 1,6 mm - **large**

Envase (840 piezas):
6 mini módulos de 10 ligaduras
por 7 colores

**K7320-93
KIT LIGADURAS ELÁSTICAS PLATA Y TRANSPARENTES EN MINI MÓDULOS**

Envase (840 piezas):
84 mini módulos surtidos de 10 ligaduras,
24 small, 36 medium, 24 large

MINI MÓDULOS

colores	small	medium	large
	diám. int. 1,0 mm	diám. int. 1,3 mm	diám. int. 1,6 mm
azul	K7351-10A	K7352-13A	K7353-16A
rosa	K7351-10S	K7352-13S	K7353-16S
verde	K7351-10V	K7352-13V	K7353-16V
amarillo	K7351-10G	K7352-13G	K7353-16G
rojo	K7351-10R	K7352-13R	K7353-16R
naranja	K7351-10E	K7352-13E	K7353-16E
violeta	K7351-10L	K7352-13L	K7353-16L
transparente	K7321-10	K7322-13	K7323-16
plata	K7361-10	K7362-13	K7363-16

200
piezas

Envase: 20 mini módulos
de 10 ligaduras cada uno



Ø	gris		transparente	envase
	interno			
1,30 mm	ancha	K6460-13	K6420-13	bobinas de 5 m (15 feet)
	estrecha	K6465-13	K6425-13	
	extraestrecha	K6466-13	K6426-13	



ancha



estrecha



extraestrecha

CADENITAS ELÁSTICAS PARA LIGADURAS

Se utilizan para fijar el arco sobre el bracket y al mismo tiempo como tracción para el cierre o la estabilización de espacios entre dos dientes o grupos de dientes.

KIT CADENITAS ELÁSTICAS PARA LIGADURAS

K6429-93 Transparente
K6469-93 Gris

Envase (6 bobinas):
 - 3 estrechas
 - 2 extraestrechas
 - 1 ancha con soporte de plexiglás


NEW



K6378-03 SEPARADORES RADIOPACOS

Su sección circular, junto con una excelente y constante elasticidad, permite una fácil aplicación con la pinza P1141-00, asegurando una separación gradual y cómoda de las piezas antes de la aplicación de las bandas. Se suministran en una práctica bolsita, ya separados y listos para usar. Radiopacos para una localización radiográfica segura.


Envase: 1000 piezas

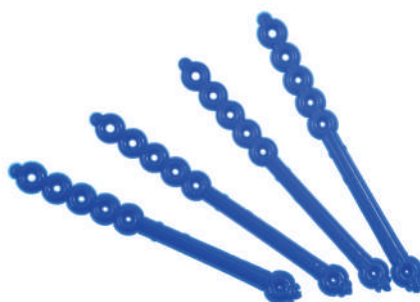

K6461-01 TIE-BACK

Para aplicar tracciones elásticas en la técnica STEP. Fácilmente adaptable sobre el tubo molar. Los cuatro agujeros anteriores permiten medir con precisión la fuerza sobre el gancho puesto sobre el arco. Color azul.

Envase: 10 piezas

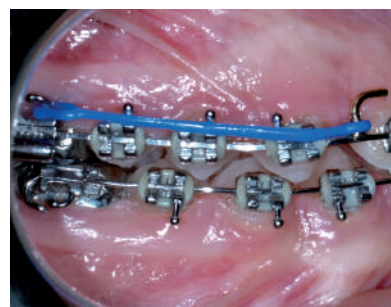

Fotografía facilitada por el Doctor A. Fortini



LIGADURAS ELÁSTICAS EN MÓDULOS

∅	transparente	gris	rosa	azul	verde	
interno						envase
1,0 mm	K7825-10	K7865-10	K7855-10S	K7855-10A	K7855-10V	600 piezas
1,3 mm	K7825-13	K7865-13	K7855-13S	K7855-13A	K7855-13V	

Envase: 30 módulos de 20 ligaduras cada uno

HILO ELÁSTICO PARA LIGADURAS Y TRACCIONES

De poliuretano atóxico, muy elástico. La superficie rugosa favorece la resistencia de las ligaduras y de los nudos de las tracciones.

∅	transparente	
mm		envase
0,6	K6125-06	8 m



LIGADURAS ELÁSTICAS

Pueden sustituir las ligaduras metálicas. Se enganchan con facilidad bajo las aletas de los brackets.

colores			
ligeras	transparente	K6320-10	1000 piezas
medias		K6320-13	
ligeras	gris	K6360-10	
medias		K6360-13	



HILO DE ALGODÓN PARA LIGADURAS ELÁSTICAS

Hilo especial de algodón elástico estudiado para distalizar, para obtener separaciones, tracciones de dientes intruidos, rotaciones y cierre de espacios al final del tratamiento.

ligero	K4030-01	envase: carretes de 25 m
medio	K4030-02	
fuerte	K4030-03	



ALAMBRE PARA LIGADURAS

De acero inoxidable.



		Ø			
envase		mm	inch		envase
bobina de 20 gr aprox.	K4050-23	0,23	.009	K4051-23	carrete de 500 gr aprox.
	K4050-25	0,25	.010	K4051-25	
	K4050-28	0,28	.011	K4051-28	
	K4050-30	0,30	.012	K4051-30	
	K4050-36	0,36	.014	K4051-36	



HILO ELÁSTICO PARA LIGADURAS

Alargamiento del 500% con poca fatiga. Resistente a los líquidos orales. Bobinas de 8 m

Ø		transparente	
mm			envase
0,6	K6020-06		8 m



K0470-00 TUBO PARA ARCOS LABIALES

Realizado en material químicamente inerte, antiadhesivo, no poroso y con un bajo coeficiente de fricción. Ligeramente termoretraible si es calentado a 150° C. Apto para revestir alambres del diámetro de 0,7 a 0,8 mm. **Envase:** 5 m



TUBO DE ELASTÓMERO PARA PROTECCIÓN

La óptima flexibilidad facilita la introducción del tubo sobre el arco para proteger la mucosa. Cortado a la justa medida previene el cierre de los espacios.

Ø interno		transparente	
mm	inch		envase
0,7	.027	K6940-07	3 m



**ALAMBRE PREFORMADO
KOBAYASHI**

Una vez efectuada la ligadura, el asa soldada en la extremidad superior se presta óptimamente para formar un soporte de tracción sobre cualquier bracket.

∅		Diagrama		envase
mm	inch			
0,30	.012	K4610-30		100
0,36	.014	K4610-36		



**K4680-36
LIGADURAS
PREFORMADAS
KOBAYASHI NATURA®**

Construidas con alambre de diámetro .014" (0,36 mm), tienen un revestimiento color diente.

Envase: 100 piezas



**K4280-30
ALAMBRE
PREFORMADO
PARA LIGADURAS NATURA®**

Costruido en alambre de diámetro .012" (0,30 mm) tiene un revestimiento color diente.


Envase: 100 alambres



**K4430-25
PALOMILLAS
PREFORMADAS**

Construidas con alambre de diámetro .010" (0,25 mm).

Envase: 1000 piezas

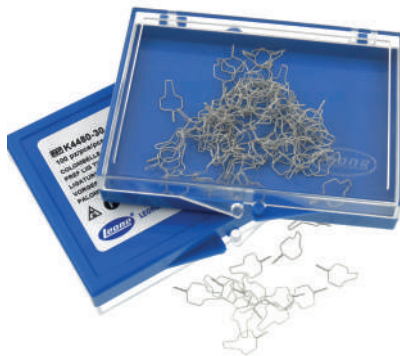

**K4480-30
PALOMILLAS
PREFORMADAS NATURA®**

Construidas con alambre de diámetro .012" (0,30 mm) tienen un revestimiento color diente.

Envase: 100 piezas



**ALAMBRE
PREFORMADO
PARA LIGADURAS**

∅		Diagrama		envase
mm	inch			
0,23	.009	K4210-23		1000
0,25	.010	K4210-25		
0,28	.011	K4210-28		
0,30	.012	K4210-30		




ELÁSTICOS INTRAORALES

Fabricados en puro látex de goma. Sobre los envases están indicados el diámetro y la fuerza ejercida cuando el elástico es alargado tres veces su diámetro. Además sobre cada bolsita está imprimida una imagen coloreada, para la inmediata identificación por parte de los pacientes más pequeños.

Envase: 10 bolsitas de 100 piezas aprox.

	Ø interno					
	marrón	verde	rojo	azul	naranja	
	1/8" - 3,2 mm	3/16" - 4,8 mm	1/4" - 6,4 mm	5/16" - 7,9 mm	3/8" - 9,5 mm	
ligeros 2,5 oz - 70 gr		K0901-02	K0902-02	K0903-02	K0904-02	K0905-02
medianos 4,5 oz - 126 gr		K0906-04	K0907-04	K0908-04	K0909-04	K0910-04
fuertes 6,5 oz - 182 gr		K0915-06	K0911-06	K0912-06	K0913-06	K0914-06

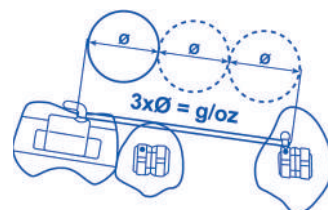


ELÁSTICOS EXTRAORALES

Fabricados en puro látex de goma.
Envase: 1 bolsita de 100 piezas aproximadamente

K0950-00 APLICADOR PARA ELÁSTICOS INTRAORALES

Envase: 100 piezas

	Ø interno					
	3/16" - 4,8 mm	1/4" - 6,4 mm	5/16" - 7,9 mm	3/8" - 9,5 mm	1/2" - 12,7 mm	
fuertes 8 oz - 224 gr	K0932-08	K0933-08	K0934-08	K0935-08	K0936-08	

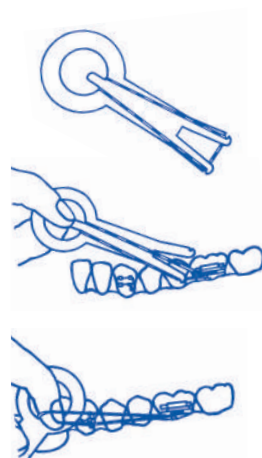

Atención: estos productos contienen látex de goma natural que puede causar reacciones alérgicas.